


ステラッド™専用トレー

APTIMAX™ (アプティマックス) 汎用滅菌トレー
とはどんなトレー？

ASP Japan 合同会社 Professional Education


APTIMAX™汎用滅菌トレー

ステラッド™滅菌器には、ステラッド™専用付属品、および**APTIMAX™汎用滅菌トレー**（以下トレー）のみを使用してください。これらのトレーは、積み付けられた全ての被滅菌物の周囲に過酸化水素およびプラズマが拡散できるように設計されています

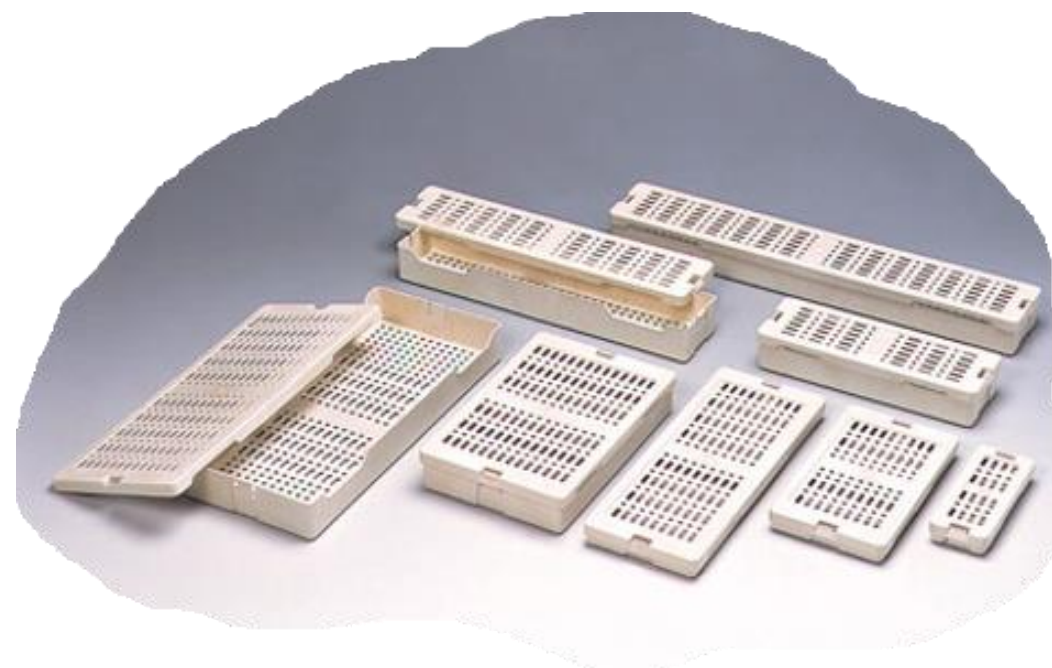

STERRAD™ 100NX ALLClear テクノロジー取扱説明書 p31より引用

APITMAX™汎用滅菌トレーとは

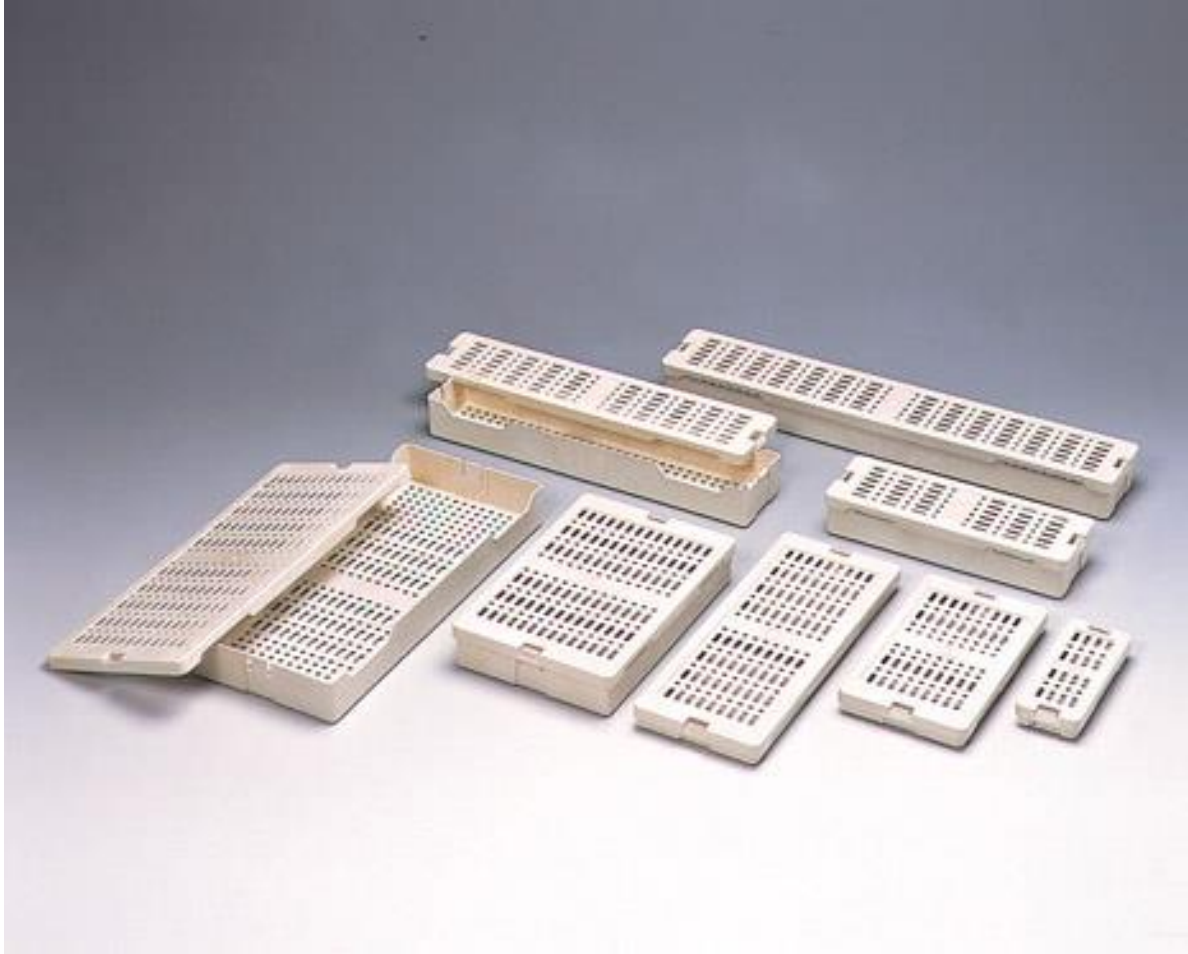


ステラッド™用のバリデーション済のトレーです


- 薬剤の吸着が極めて少ない
- 軽量素材を使用
- 様々な器材に適したサイズを各種取り揃えています

トレー用マット・ホルダー

トレー内に何かを敷く場合は、必ずステラッド™専用マットかポリプロピレン製の専用滅菌ラップをお使いください

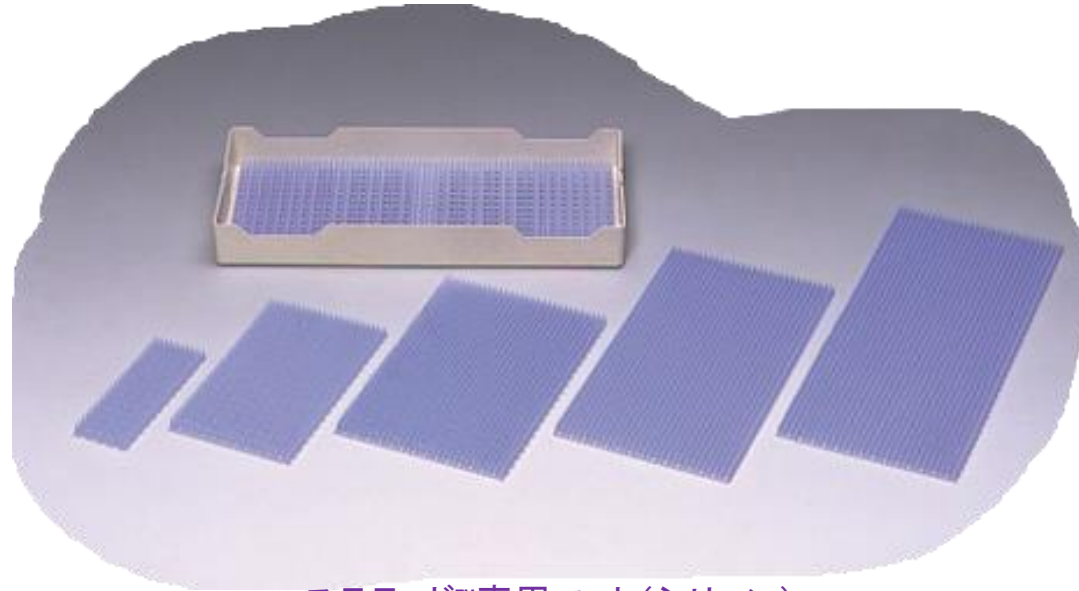


ステラッド™専用マット(シリコン)

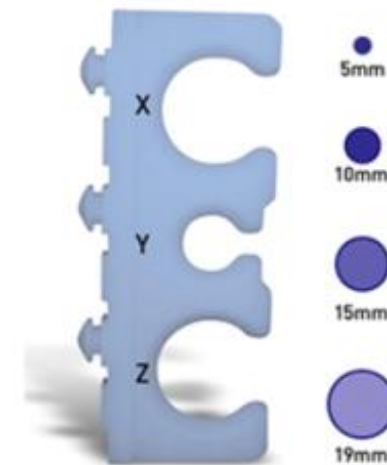


APTIMAX™
汎用滅菌トレー用ホルダー

STERRAD™ 100NX ALLClear テクノロジー取扱説明書 p31より引用

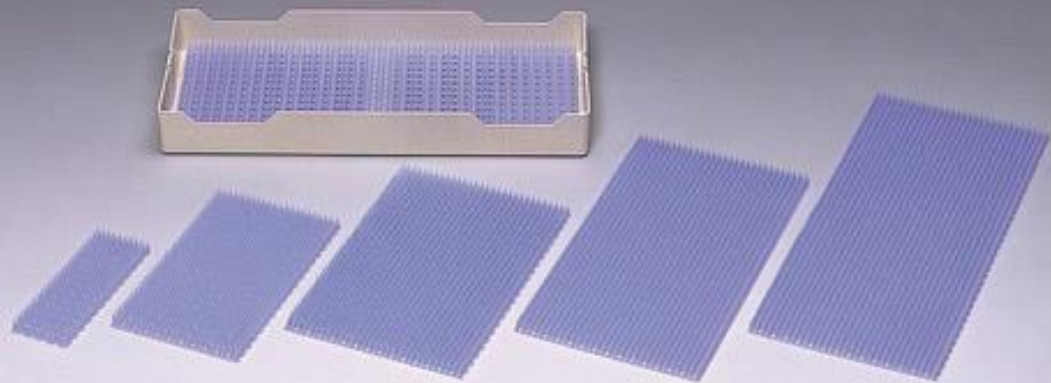

- サイズに合ったシリコンマットがあり器材をホールドしやすい
- 滅菌剤が通る穴が沢山あり、マットにもトレーサイズに合わせた穴があるため同じように滅菌剤が通ります


ステラッド™対応バリデーション済 吸着の少ないホルダーです

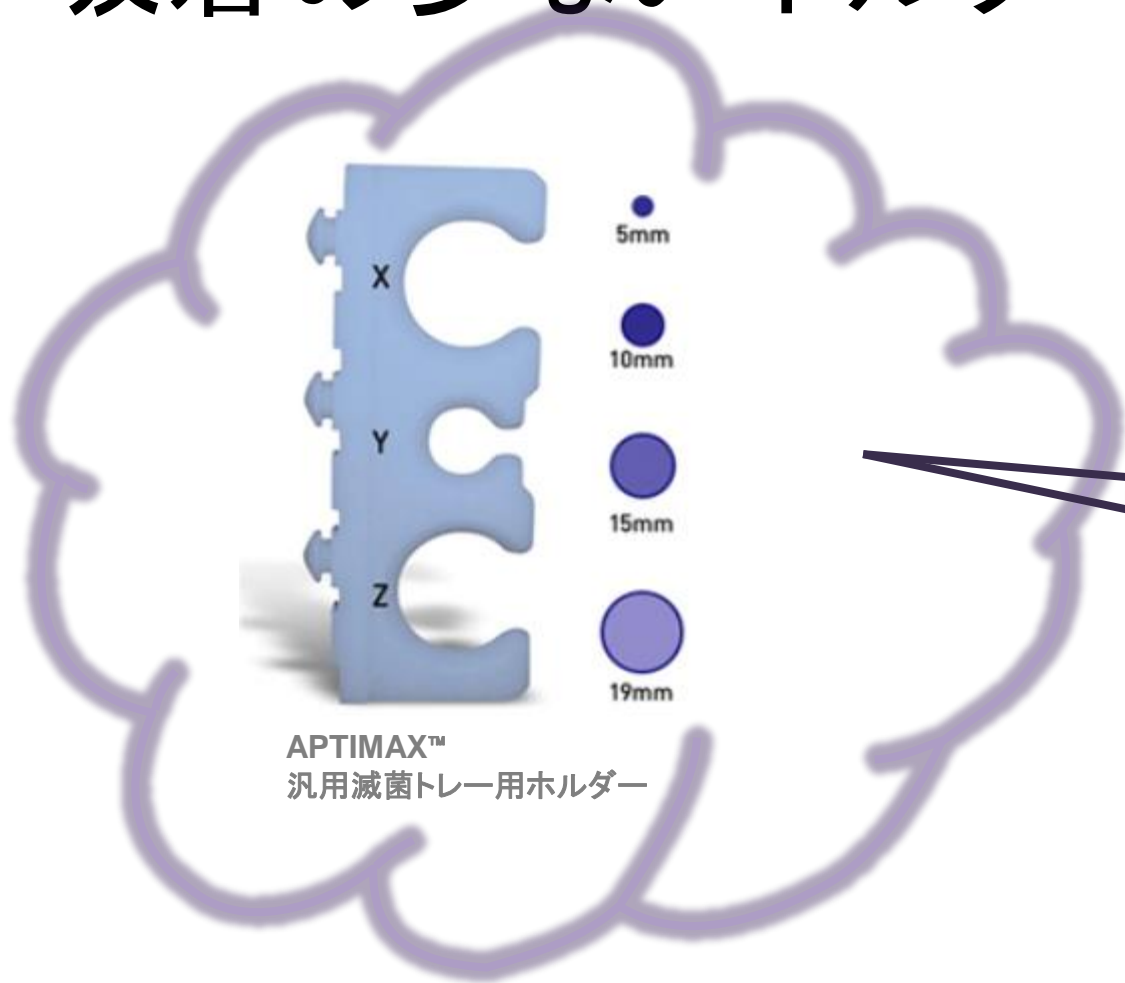

APTIMAX™
汎用滅菌トレー用ホルダー



底にある穴にむけて
斜めにカットしています
シリコンマットを使用した
際、ぴったりくっつく面が
少なくなり、空気や滅菌
剤の通りをより良くして
います

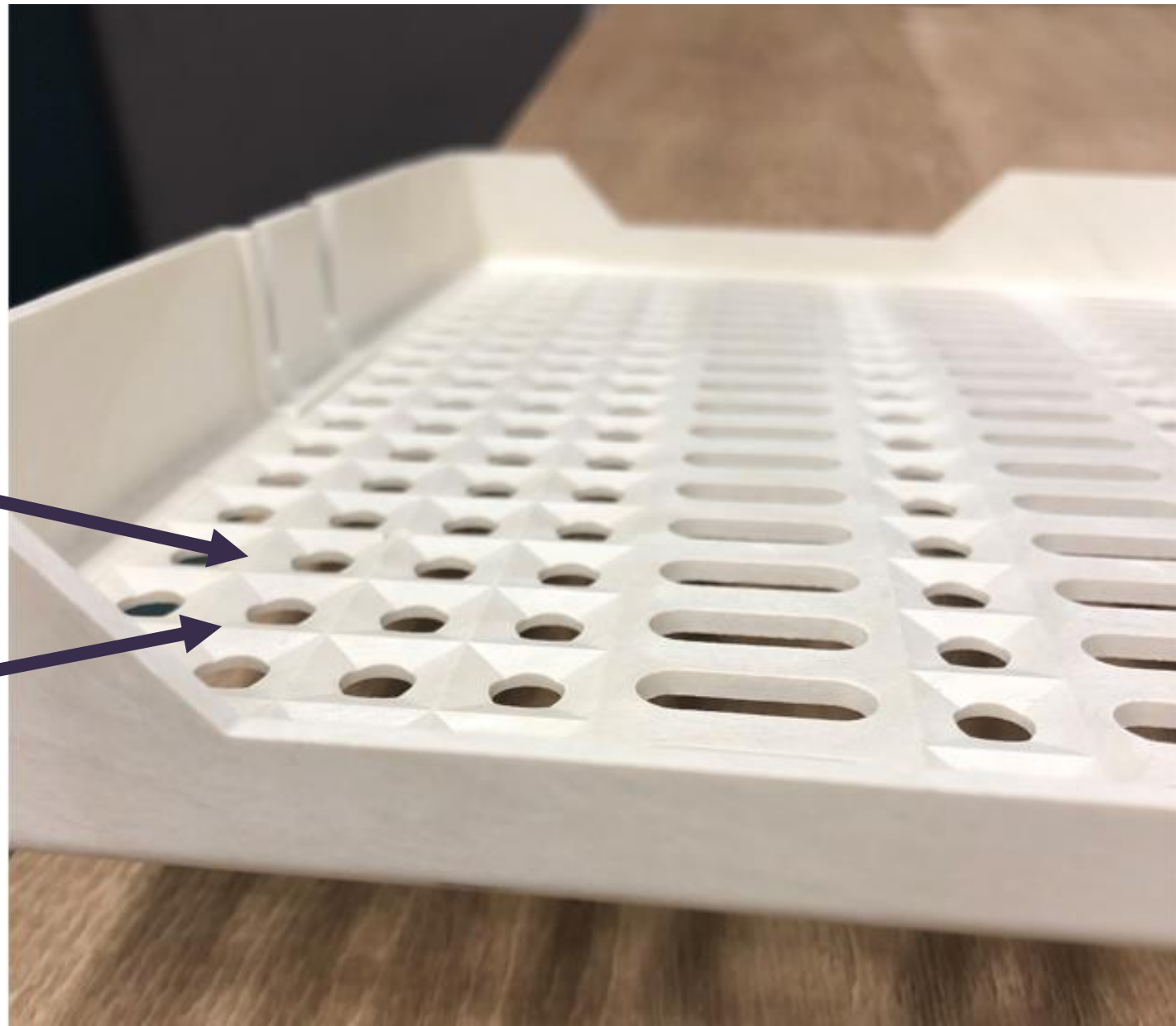


APTIMAX™ 汎用滅菌トレーは
蓋を含め、滅菌剤が入る・空
気の入れ替わる通気口が多
いんです



ステラッド™用トレー (APTIMAX™汎用滅菌 トレー) に器材セットした場合の 例を紹介します


器材の大きさにあったトレイを選択しセット

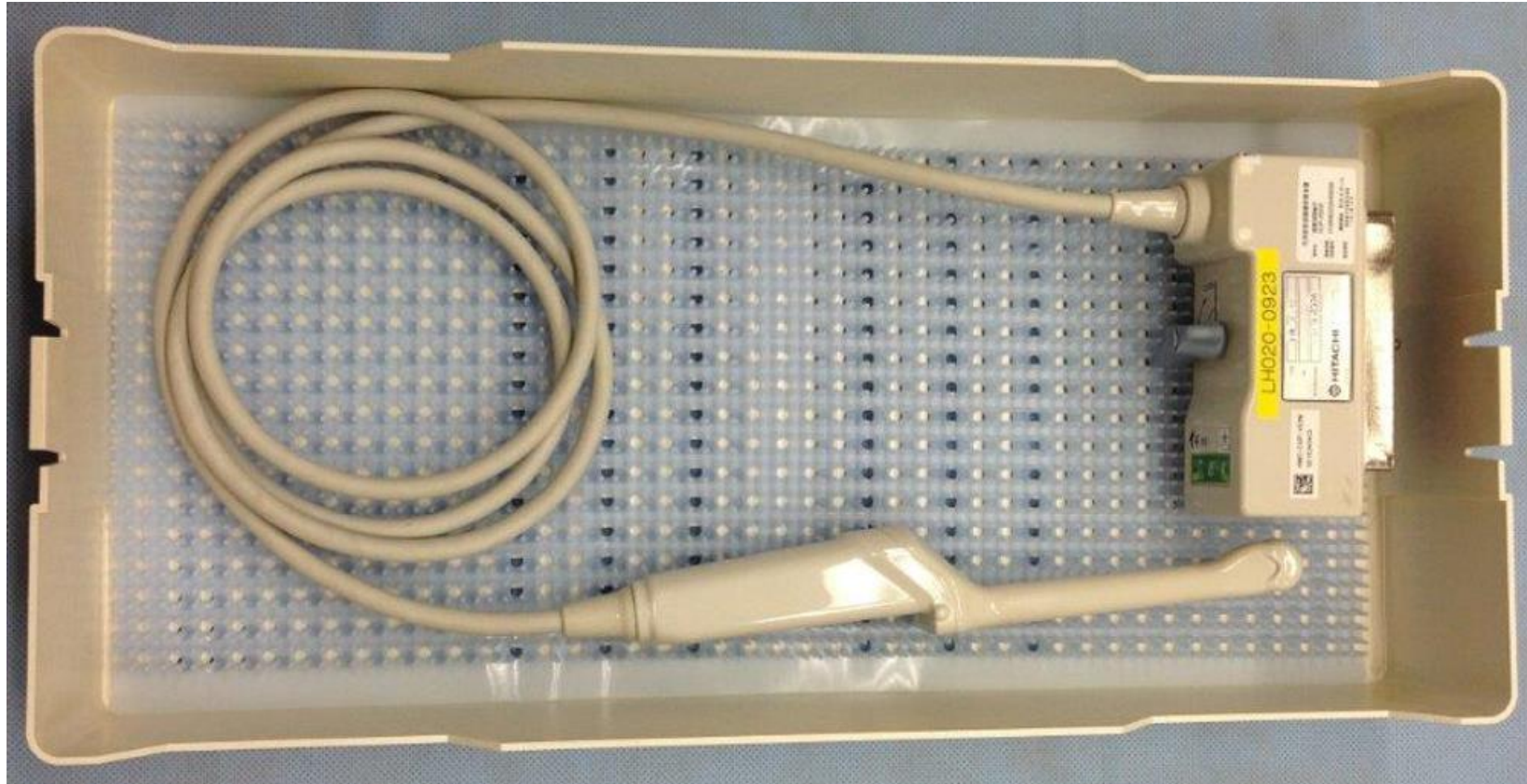

ラップで包む




ステラッド™へ

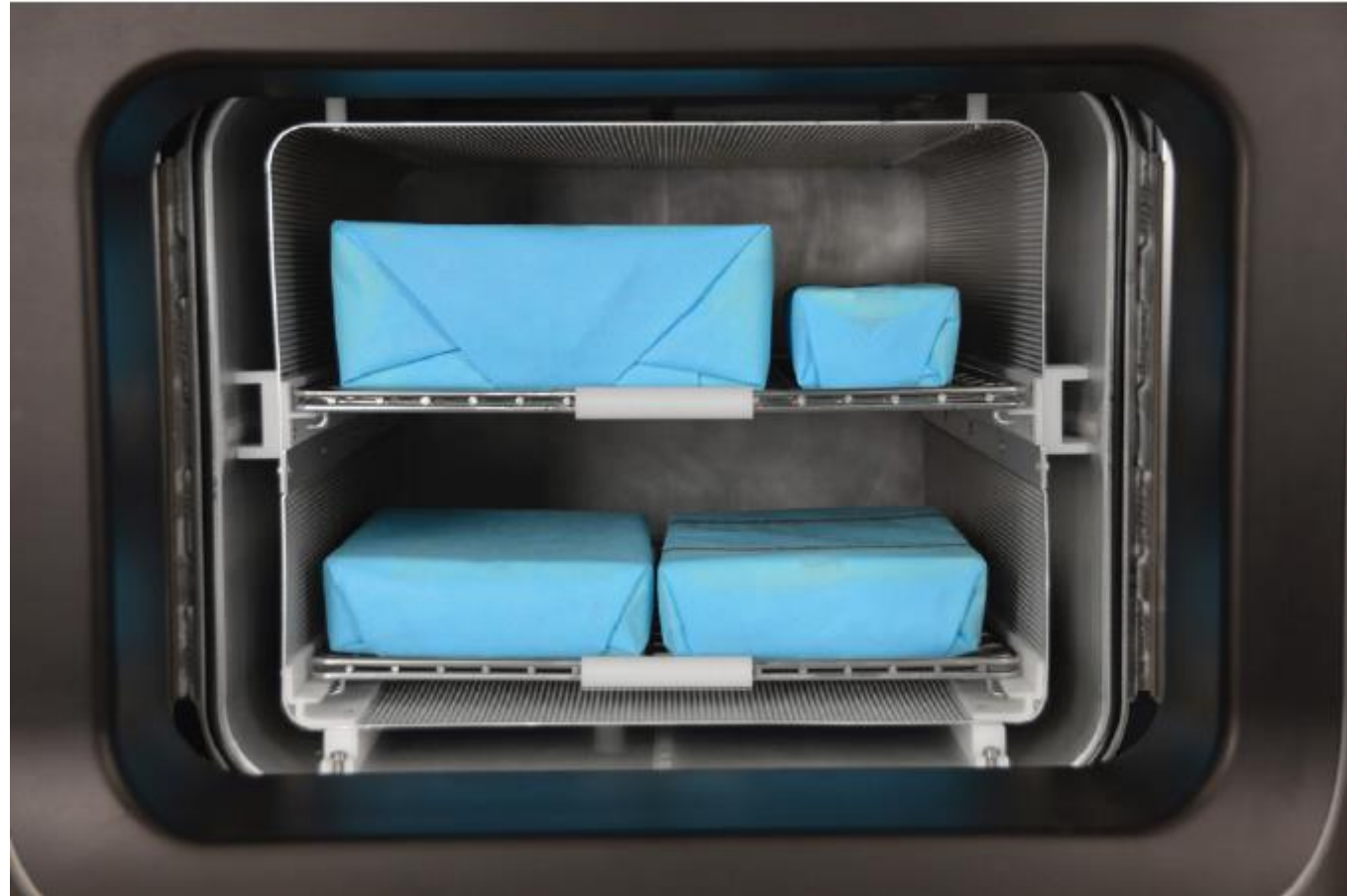


その他のセット例 / 写真

ウロ用硬性鏡 セット例

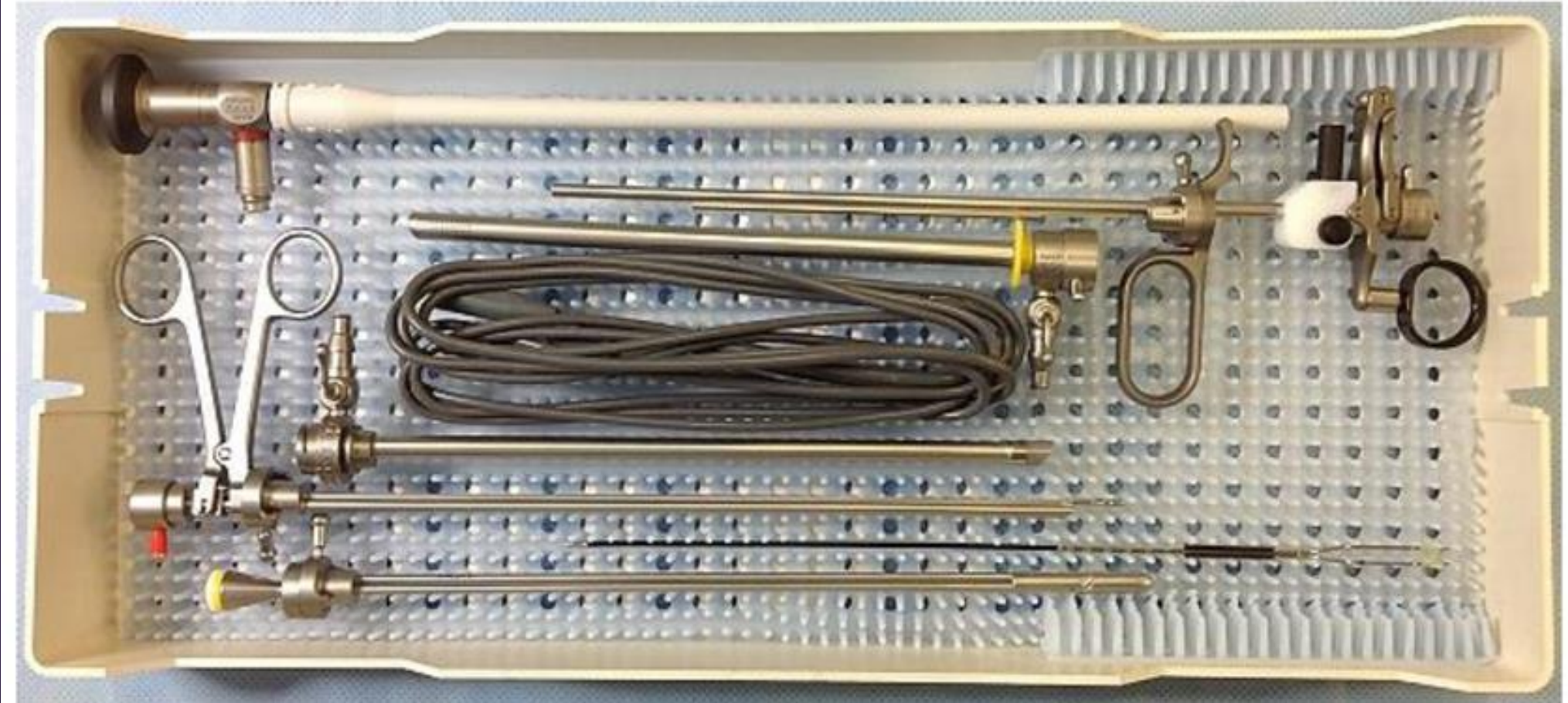

APTIMAX™(アプチマックス)汎用滅菌トレー 19454(W192×L446×H53mm)
APTIMAX™(アプチマックス)汎用滅菌トレー用マット 19609(191×432mm)


ウロ用硬性鏡 セット例

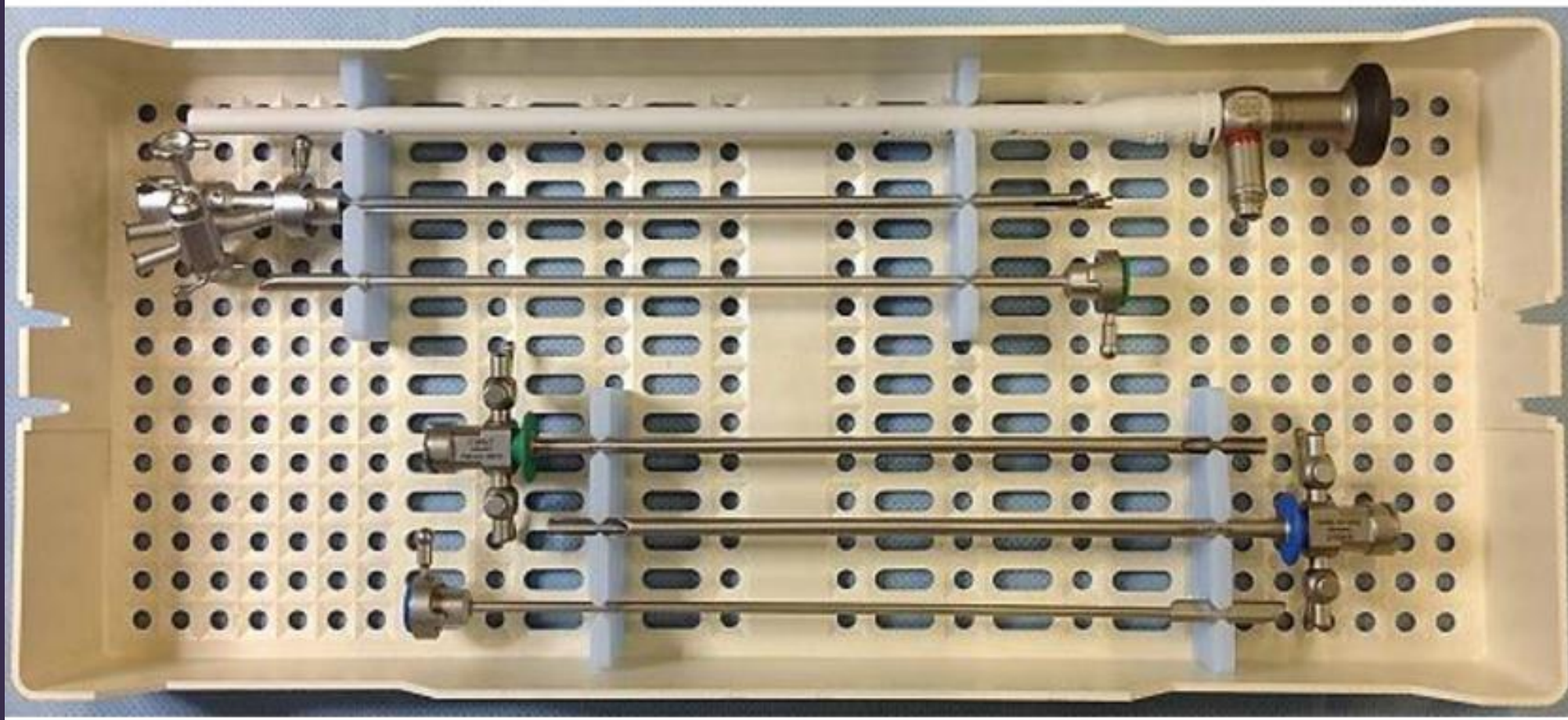

APTIMAX™ (アプチマックス) 汎用滅菌トレー 19414(W270×L576×H100mm)

APTIMAX™ (アプチマックス) 汎用滅菌トレー用ホルダー 19626(5×5×5mm)×4個

代表的な外科用硬性鏡(テレスコープ) セット例

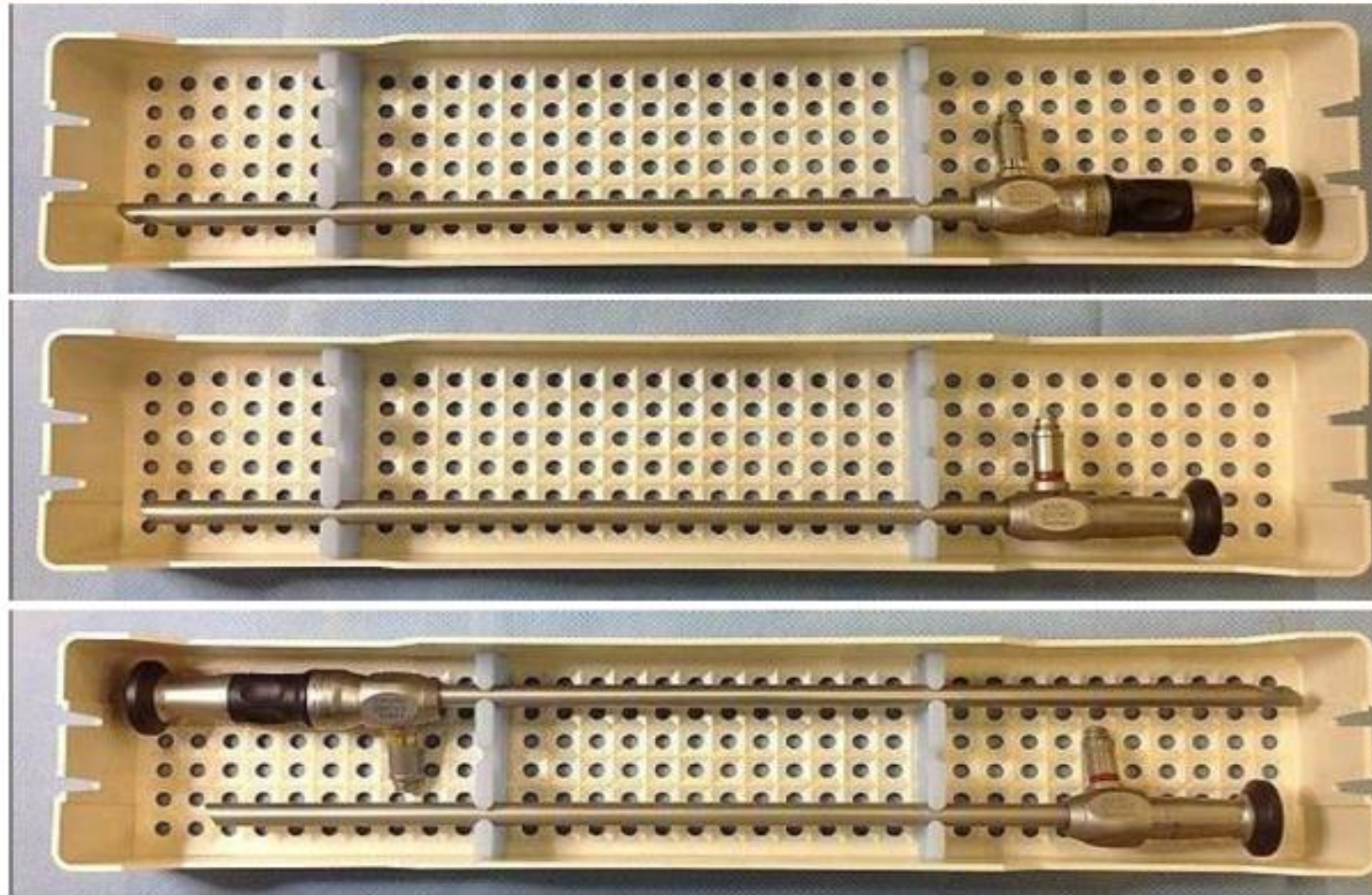

APTIMAX™(アップチマックス)汎用滅菌トレー 19451(W270×L446×H53mm)

APTIMAX™(アップチマックス)汎用滅菌トレー用ホルダー 19624(10×10×10mm)×4個

ご質問・ご意見・勉強会のご依頼等は担当営業まで！

お待ちしております。